

NEWSLETTER 5/2009

UN SUCCÈS APPRÉCIABLE

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Etes-vous la bonne personne pour recevoir cette lettre d'information ? Souhaitez-vous qu'une autre personne dans votre entreprise reçoive également cette newsletter ? Alors envoyez-nous un courrier électronique avec le nom et l'adresse Email de cette personne à: soehnle.balances@wanadoo.fr.

Quoi de nouveau ?


- * **Nouveautés: Balances laboratoires avec une technique de mesure précise**
Disponible à partir de Septembre 2009!

Soehnle Professional va lancer une nouvelle série de balances laboratoires et des appareils de mesure pour déterminer l'humidité. Dès maintenant nous allons vous offrir des balances de précision et d'analyse avec des multiples fonctions et un design moderne. La gamme de produits de Soehnle Professional sera complétée d'une façon excellente à cause d'une qualité meilleure et une manipulation simple.

Toutes les balances de précision et d'analyse sont **approuvées classe I ou II**. Vous avez le choix entre trois variations de fonctionnement – **Standard, Basic et Pro** – qui vous permettent, de choisir le produit approprié. Indépendant de la version, toutes les balances vous offrent les capacités suivantes:

- * Ecran graphique ou affichage à cristaux liquides
- * Fonctions: Comptage de pièces, Pesage au pourcentage, Contrôler et Pesage suspendu à l'aide d'un crochet e.a.
- * Ajustage interne automatique
- * Interface RS232 sérielle comme standard
- * Possibilité de connexion d'un deuxième indicateur

Balances de précision, approuvées classe II

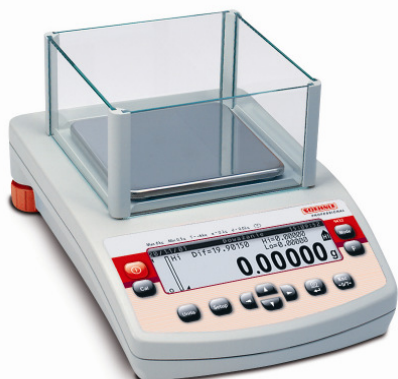

- * **Nouveauté :**
A/D-Convertisseur Profi 3005
Disponible à partir de Septembre 2009!

Le **convertisseur A/D Profi 3005** permet l'utilisateur expert et les producteurs de balances l'application de capteurs DMS sans un indicateur particulier.

Les dates de mesure sont transmises au service informatique, par exemple à un PC, par des différentes interfaces optionnelles (RS232, USB, Ethernet, Bluetooth TM, etc.). Ceci permet une connexion simple de la balance au système de service informatique. On peut brancher jusqu'à six capteurs au maximum.

Deux versions sont disponibles:

La version Basic (3005.01.001) contient **un point de mesure pour les capteurs DMS et une interface sérielle RS232**. La version Profibus (3005.05.001) comprend un profibus DP additionnel.

Les fonctions de pesage disponibles sont le pesage, le tarage, l'accouplage et le dosage. Avec une dissolution interne de 16 mio. pièces et un taux de valeur mesurée de 80 par seconde, cela représente une solution idéale pour la technique de pesage dans multiples secteurs industriels. Vous trouvez des exemples d'application dans la construction d'équipements, la technologie de procédé et dans les domaines scientifiques.

Le système est simplement configuré par un programme de PC software, qui est disponible en Allemand, en Anglais et en Français.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous.

Balances d'analyse, approuvées classe I




Notre nouvelle série de produits inclut aussi des appareils de mesure pour mesurer l'humidité, ce qui sert à la détermination de la part d'humidité dans une quantité d'une matière relativement petite, qui peut être composée de plusieurs ingrédients. Les matières probatoires sont pesées et ensuite vont parcourir un procès de séchage. Par la différence du pesage initial et du deuxième pesage après le séchage, il est possible de déterminer l'humidité exacte de la matière probatoire. Les domaines d'emplois sont dans les laboratoires et vont jusqu'aux applications industrielles et commerciales.

Appareil de mesure pour la détermination d'humidité



Dans quelques semaines nous allons vous informer en détail des différents modèles et aussi pouvoir fournir les brochures correspondantes.

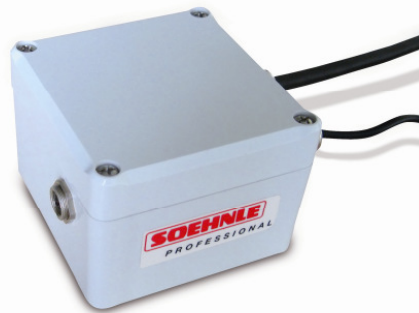

Particularités ?

MEDICA 2009

Soehnle Professional va exposer de nouveau à la **MEDICA 2009**, le plus grand salon mondial de médecine!

Venez nous voir dans hall 12 sur notre stand E31 à Dusseldorf et laissez vous convaincre par nos nouveaux produits. Nous vous attendons avec plaisir!



18th - 21st
November 2009

Dusseldorf,
Germany

www.medica.com

Contact:

Il vous manque une newsletter?

Suivez le lien http://www.soehnle-professional.com/fr/entreprise/dernieres_nouvelles/ et trouvez nos newsletters archivées.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à [nous](#) contacter!

Soehnle SAS
3, Rue de l'Eglise
67230 BENFELD
Tel.: 03 88 08 53 41
Fax: 03 88 08 54 01
Email: soehnle.balances@wanadoo.fr

www.soehnle-professional.com