
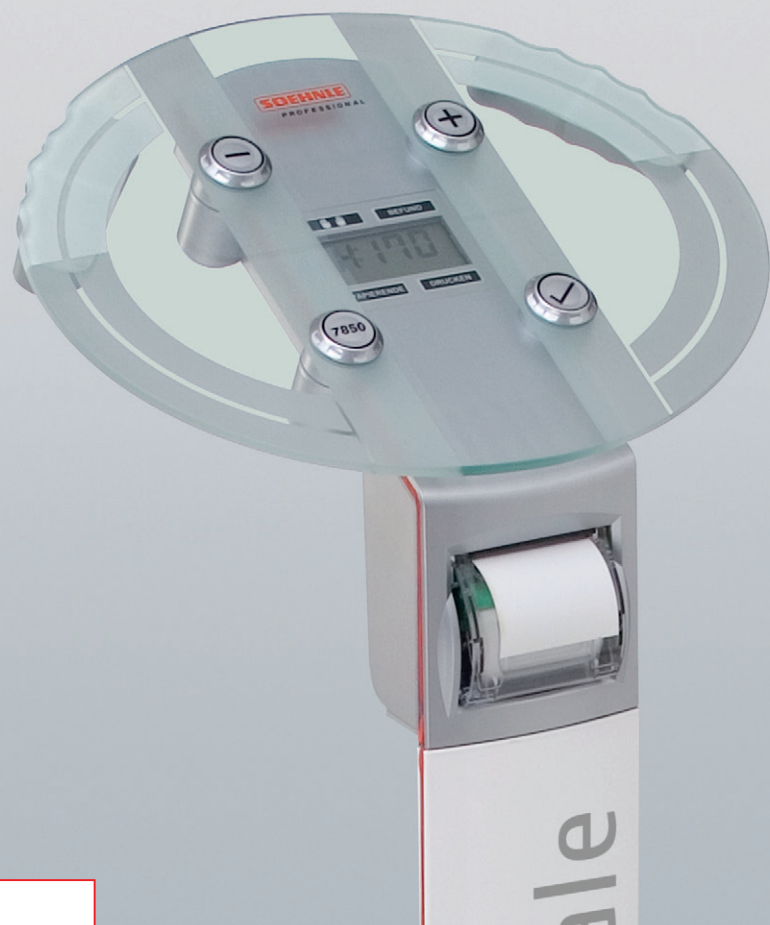


FITNESSWAAGE

PRODUKTNUMMER 7850

Medizin, Gesundheit und Wellness

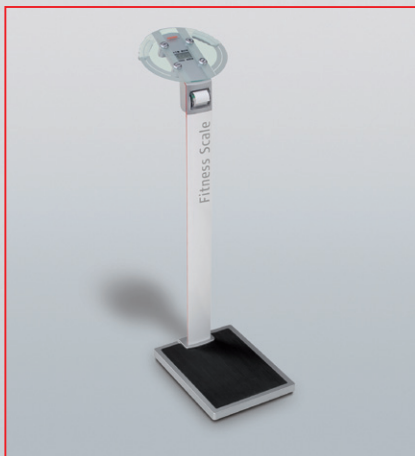

- › Körper-Analysefunktion
- › Bedienergeführte Benutzung und Dateneingabe
- › Impedanzmessung über die Hände
- › Thermodrucker für Belegdruck
- › In vielen Landessprachen programmierbar
- › Kleidungsanteil individuell einstellbar

FITNESSWAAGE

PRODUKTNUMMER 7850

Eigenschaften



Die Fitnesswaage eignet sich ideal für die Nutzung in Fitnessstudios, Apotheken, Ernährungsberatungen und Wellnesshotels. Mit ihrer Körperanalysefunktion können neben dem Gewicht und Body Mass Index auch der Muskel-, Fett- und Wasseranteil genau gemessen und der aktuelle Energieumsatz ermittelt werden. Die Messung erfolgt dabei über die Hände, so dass sich der Benutzer komfortabel und Zeit sparend mit Schuhen auf die Waage stellen kann. Die Waage ist im Vergleich zu den derzeit bekannten Analysewaagen besonders einfach zu bedienen und bedarf keiner komplizierten und ausführlichen Anleitung. Mit dem integrierten Drucker lassen sich die Gewichts- und Analysewerte einschließlich individueller Bewertung bequem ausdrucken, dokumentieren und über einen längeren Zeitraum hinweg problemlos verfolgen.

Verfügbare Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Ungarisch, Niederländisch, Tschechisch, Dänisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Norwegisch, Slowakisch, Finnisch, Türkisch

Technische Daten

- › Elektronisches Wägesystem mit 4 Wägezellen
- › Umschaltung in Einheit St/lb/oz
- › Batteriegepufferte Uhr

- › Stromversorgung: Steckernetzteil
- › Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 17 mm
- › 4 Tasten zur Dateneingabe
- › 4 beleuchtete Info-Felder
- › Plattformgröße: B 370 x T 480 x H 45 mm
- › USB-Datenkabel

Ausführung

- › Optimale Voraussetzung für die Hygiene und Handhabung, Impedanzmessung erfolgt über die Hände (nicht über nackte Füße)
- › Einfache Reinigung der Glasoberfläche
- › Kleidungsgewicht wird für die Analysewerte-Berechnung abgezogen
- › Einfacher Wechsel der Papierrolle durch „Easy paper loading“-Funktion
- › Gute Standsicherheit durch hohes Gewicht der Bodenplatte
- › Uhrzeit-Anzeige
- › Ausdruck von Datum/Uhrzeit, Gewicht, Analysewerte sowie Bewertung
- › Aluminiumstativ
- › Inkl. CD-Rom mit Software für Druckbildgestaltung und individuelle Einstellungen
- › Erdanziehungskraftfaktor manuell einstellbar

Bestellinformationen

Bestellnummer	Wägebereich	Ziffernschritt	Abmessungen	Gewicht
	kg	g	mm	kg
7850.02.001	180	100	370 x 670 x 1.290	17,8

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com